

# Aura family

— Ambu ラリングルマスク —



Ambu ラリングルマスク  
Aura ファミリーは  
ディスポーザブルの  
ラリングルマスクです。

# Aura family

— Ambu ラリングェルマスク —

- 》 形状は5タイプ。どのタイプも小児用\*1)から成人用までサイズ豊富です。
- 》 エアウェイチューブとカフは一体成形されており、使用中のカフの脱落の心配はありません。
- 》 やわらかいフタル酸フリーのPVC製です。カフの先端は折れ曲がり防止の加工が施されています。
- 》 製品ごとに必要な情報が、気道留置後も確認できる位置にプリントされています。

\*1) A randomized comparison of the Ambu AuraGain and the LMA Supreme in infants and children. Jagannathan N, Hajduk J., Sohn L et al. Anaesthesia 2016 Feb; 71(2): 205-12



# AuraGain

オーラゲイン



- 胃管挿入が可能で、誤嚥のリスクを軽減します。
- カフのシール圧が高く(最大40cmH<sub>2</sub>O<sup>\*2)</sup>、気道機密性を保てます。
- エアウェイチューブの内径が広くて短めなので、気管チューブへの入れ替えや気管支鏡検査の補助デバイスとしてもご使用できます。
- ラリゲルマスクを使用するほとんどすべての処置に使用していただけます。

\*2) Multicenter evaluation of the Ambu AuraGain in normal airways.  
[http://www.ambu.com/corp/products/clinical\\_studies/ambu@auragain™.aspx](http://www.ambu.com/corp/products/clinical_studies/ambu@auragain™.aspx)

サイズ	アイテム番号	患者体重	最大挿入可能 挿管チューブサイズ	最大挿入可能 胃管カテーテルサイズ	最大空気注入量
1	408100000	5kg未満	3.5mm	6Fr	4mL
1.5	408150000	5~ 10kg	4.0mm	8Fr	7mL
2	408200000	10~ 20kg	5.0mm	10Fr	10mL
2.5	408250000	20~ 30kg	5.5mm	10Fr	14mL
3	408300000	30~ 50kg	6.5mm	16Fr	20mL
4	408400000	50~ 70kg	7.5mm	16Fr	30mL
5	408500000	70~100kg	8.0mm	16Fr	40mL

# AuraOnce

オーラワンス



- エアウェイチューブの人体の解剖を模したカーブ形状により、簡単に挿入できます。
- エアウェイチューブ断面が“D”の形状になっており、挿入操作中に安定感を得られ、正しい位置により低いカフ圧で、早く留置することができます。
- さまざまな症例にお使いいただける汎用タイプです。

サイズ	アイテム番号	患者体重	最大空気注入量
1	321100000	5kg未満	4mL
1.5	321150000	5～ 10kg	7mL
2	321200000	10～ 20kg	10mL
2.5	321250000	20～ 30kg	14mL
3	321300000	30～ 50kg	20mL
4	321400000	50～ 70kg	30mL
5	321500000	70～100kg	40mL

# Aura-i

オーラアイ



- 通常の気道確保用デバイスとしてだけでなく、緊急で挿管が必要になった場合には挿管補助用デバイスとして使用できます。
- 挿管補助しやすいように、Aura-i のエアウェイチューブは短く、内径が大きめになっています。
- バイトブロックつきです。

サイズ	アイテム番号	患者体重	最大挿入可能 挿管チューブサイズ	最大空気注入量
1	329100000	5kg未満	3.5mm	4mL
1.5	329150000	5～ 10kg	4.0mm	7mL
2	329200000	10～ 20kg	5.0mm	10mL
2.5	329250000	20～ 30kg	5.5mm	14mL
3	329300000	30～ 50kg	6.5mm	20mL
4	329400000	50～ 70kg	7.5mm	30mL
5	329500000	70～100kg	8.0mm	40mL



# AuraFlex

オーラフレックス



- 耳鼻咽喉科、眼科、歯科、頭頸部などの手術用のラリゲルマスクです。
- エアウェイチューブをどの方向に動かしてもシール圧は保たれます。またエアウェイチューブをワイヤで補強することにより気道閉塞しないようにデザインされています。
- パイロットバルーンのインフレーションチューブはコネクタ付近まで気道チューブと一体化しており、術中に誤って切断してしまう心配がありません。

サイズ	アイテム番号	患者体重	最大空気注入量
2	327200000	10~ 20kg	10mL
2.5	327250000	20~ 30kg	14mL
3	327300000	30~ 50kg	20mL
4	327400000	50~ 70kg	30mL
5	327500000	70~100kg	40mL

# AuraStraight


オーラストレイト



- さまざまなカーブの気道にフィットするストレート形状です。
- なめらかな表面加工と、カフ先端の折れ曲がり防止加工により、挿入も抜去も容易です。
- カーブしたラリングルマスクよりストレートのラリングルマスクを扱い慣れている方におすすめです。

サイズ	アイテム番号	患者体重	最大空気注入量
1	324100000	5kg未満	4mL
1.5	324150000	5～ 10kg	7mL
2	324200000	10～ 20kg	10mL
2.5	324250000	20～ 30kg	14mL
3	324300000	30～ 50kg	20mL
4	324400000	50～ 70kg	30mL
5	324500000	70～100kg	40mL

	AuraGain	AuraOnce	Aura-i	AuraStraight	AuraFlex
胃管カテーテル挿入	●	—	—	—	—
気管挿管への移行	●	—	●	—	—
バイトブロックの有無	●	—	●	—	—
MRI対応	●	●	●	●	—
一体成形	—	●	—	●	—
カフ先端の折れ曲がり防止加工	●	●	●	●	●

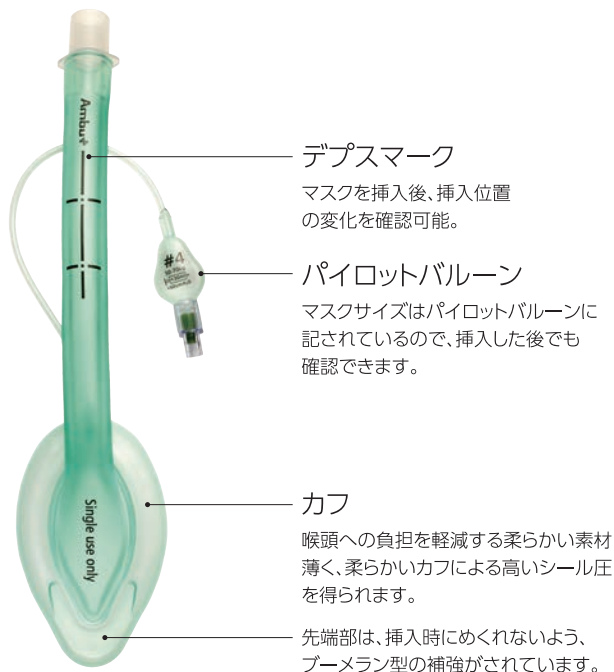

販売名/Ambu ラリングルマスク(短期的使用口腔咽頭チューブ)

認証番号: 301AFBZI00010000

注意: 添付文書及び取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。  
改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。  
本書の内容を無断転載することはできません。

【選任製造販売業者等の氏名又は名称等】

選任製造販売業者: 株式会社メッツ  
製造元: Ambu A/S (デンマーク)



【製品に関するお問合せ先】

アンブ株式会社

電話番号: 03-6222-8723 (代)

